

Gran Torino


Biliary Endoprosthesis Kits



Protesi in poliuretano idrofilo con 8 fori ovali




Punta Pigtail rastremata con 4 fori ovali

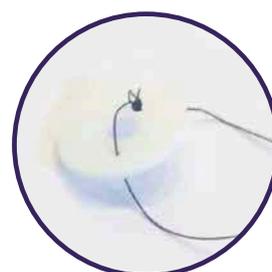

Filo di ritenzione prossimale, con bottone sottocutaneo

GRAN TORINO Kit con endoprotesi biliare in poliuretano idrofilo

Kit endoprotesi biliare 12fr punta pigtail per il drenaggio a lungo termine, con sistema d'introduzione che comprende un introduttore Peel-Away 13fr.

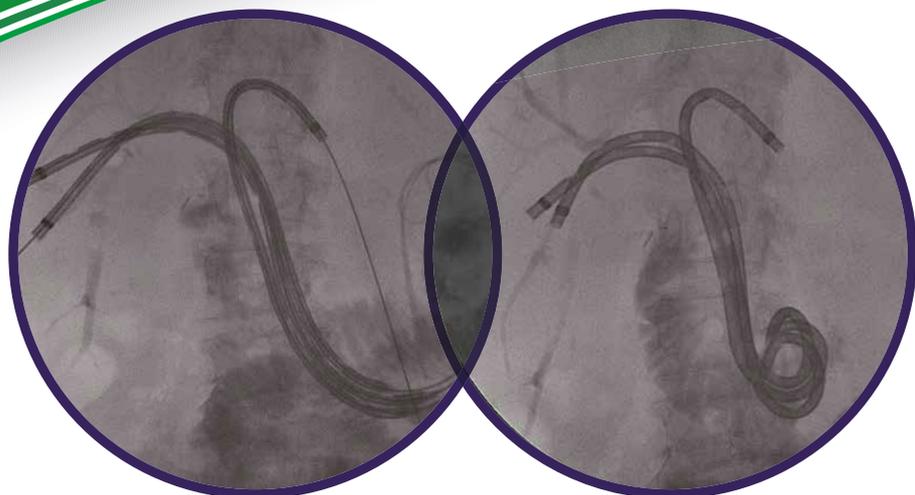

CARATTERISTICHE

- Protesi in poliuretano morbido, biocompatibile, altamente radiopaco e resistente all'usura
- Rivestimento idrofilo che permette la facile introduzione dello stent
- 8 ampi fori ovali nella parte dritta e 4 sul pigtail garantiscono la massima capacità di drenaggio
- Fornito con catetere esterno, inseribile coassialmente, per il drenaggio iniziale
- Filo di ritenzione prossimale, collegato a un apposito dischetto in silicone di grado medico, da posizionare sotto cute, per evitare il dislocamento della protesi e impedirne la migrazione in duodeno
- Fornito con un introduttore peel-away e un sistema coassiale spingitore/raddrizzatore

CE 1936

Cat. No. MB 856012 Kit endoprotesi biliare Gran Torino

| DESCRIZIONE | QTÀ |
|---|-----|
| Stent biliare 12fr lunghezza 15cm (tratto non curvato) con filo e bottone | 1 |
| Catetere coassiale dritto 6,6fr lunghezza 35 cm | 1 |
| Introduttore/dilatatore peel-away 13fr lunghezza 30/33cm | 1 |
| Raddrizzatore e spingitore | 1 |

