

RELIEF

CATETERE PLEURICO E PERITONEALE

IL SISTEMA RELIEF È L'APPROCCIO IDEALE PER LA GESTIONE DOMICILIARE DELL'EFFUSIONE PLEURICA RICORRENTE E DELL'ASCITE E COSTITUISCE UN EFFICACE ALTERNATIVA AI TRATTAMENTI ATTUALMENTE IN USO



CARATTERISTICHE

Valvola luer lock

Impedisce il passaggio accidentale di aria o liquido attraverso il catetere e può essere collegata a qualsiasi dispositivo di raccolta mediante un connettore LLM

Cuffia 9mm in dacron

Riduce i rischi di infezione ed evita lo spostamento accidentale del catetere

Catetere in silicone

Catetere 15.5Fr in materiale morbido e flessibile, idoneo per impianto a lungo termine e che riduce il rischio di kinking

Linea di solfato di bario

Posta su tutta la lunghezza del catetere, per un'eccellente visualizzazione radiologica

Porzione fenestrata 25,5cm

30 fori rotondi assicurano la massima capacità di drenaggio

VANTAGGI

- Sicuro ed efficace
- Semplice da usare
- Valvola con connessione LLF
- Miglior qualità della vita e riduzione dei tempi ospedalieri
- Sistema di drenaggio con boccia a vuoto controllato
- Sollievo immediato della funzione respiratoria


RELIEF

CODICI E MISURE

CODICE MB856016

KIT RELIEF PER DRENAGGIO PLEURICO E PERITONEALE

Descrizione	Q.tà
Catetere pleurico relief 15.5Fr, 65 cm con valvola LLF	1
Introduttore peel-away 16Fr, 17cm	1
Tunnellizzatore 15,5cm	1
Bisturi	1
Guida metallica anima fissa, 3mm 0.35", 45cm	1
Ago 18g, 9cm	1
Siringa 10ml LLM	1
Compresse di garza	5
Sacca per drenaggio graduata 2000ml, con connessione LLM	1
Prolunga 100cm, LLM/LLM	1
Telo 75x75cm	3
Telo 100x100cm con foro adesivo diam. 20cm	1
Medicazione in schiuma 10x10cm	1
Adattatore sacca urine LLM/imbuto	1
Tappo LLM	1
Vaschetta blu	1

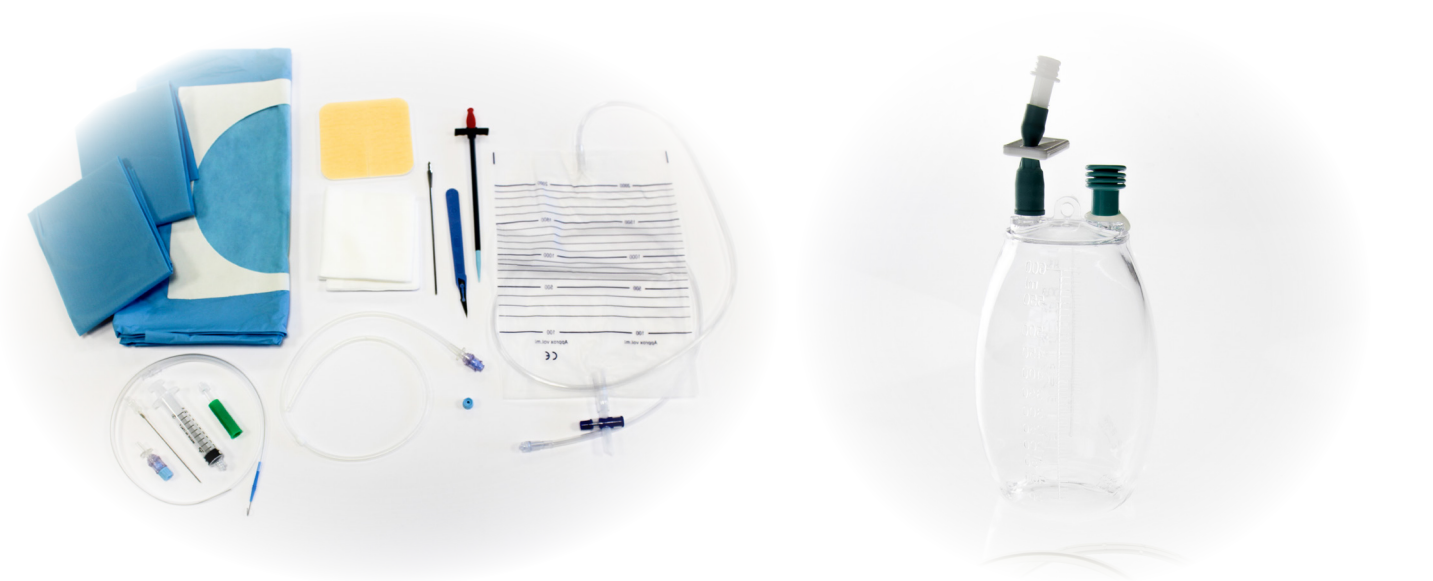

ACCESSORI

Codice	Descrizione
MB807820	Bottiglia sottovuoto per drenaggio 600ml con prolunga LLM (confezione da 10 pezzi)
MB807842	Sacca per drenaggio 2000ml con prolunga LLM (confezione da 40 pezzi)
MB899002	Tappo LLM (confezione da 25 pezzi)
MB898681	Adattatore sacca urine
MB856016/V	Set sostituzione valvola